

LINFOPRESS EASY



Bracciale a 4 settori
Arm strap four sectors



Coppia gambali a 4 settori
Pair of legs strap four sectors



Coppia gambali a 4 settori - Fascia addominale a 2 settori
Pair of legs strap four sectors - Two sectors abdominal strap



LINFOPRESS EASY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MODELLO: LINFOPRESS EASY.
- CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA: apparecchio per pressoterapia.
- CLASSIFICAZIONE TECNICA: apparecchio elettromedicale, classe I Tipo BF.
- CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO: IIa (Dir.93/42/CEE).
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 60601-1 (IEC 601-1), CEI 62.5, EN 60601-1-2 (IEC 601-1-2).
- DIMENSIONI GENERATORE: 208 x 306 x 130 mm.
- PESO: 3 Kg.
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: ~ 230V monofase (~ 115V a richiesta).
- FREQUENZA DI RETE: 50-60 Hz.
- POTENZA ASSORBITA: 180VA.
- FUSIBILI DI RETE: 2 x 1,6A ritardati.
- NUMERO SETTORI: 4.
- REGOLAZIONE PRESSIONE: da 0 a 160 mmHg.
- PORTATA D'ARIA DEL COMPRESSORE: 20 lt/min.
- PRESSIONE EROGATA DAL COMPRESSORE: max. 3Atm.

• APPLICATORI E ACCESSORI DISPONIBILI:

- Gambale a quattro settori
- Coppia gambali a quattro settori
- Bracciale a quattro settori
- Coppia bracciali a quattro settori
- Set di duplicazione a quattro uscite
- Fascia addominale a due settori
- Set sdoppiatore per fascia addominale

- Marcatura **CE**: apparecchiatura conforme alle disposizioni contenute nelle Direttive 93/42/CEE e 89/336/CEE.

TECHNICAL FEATURES:

- MODEL: LINFOPRESS EASY.
- COMMERCIAL CLASSIFICATION: instrument for pressure therapy.
- TECHNICAL CLASSIFICATION: medical device, Class I Type BF.
- MEDICAL DEVICE CLASS: IIa (93/42/EEC directive).
- REFERENCES STANDARDS: EN 60601-1 (IEC 601-1), EN 60601-1-2 (IEC 601-1-2).
- GENERATOR'S SIZE: 208 x 306 x 130 mm.
- WEIGHT: 3 Kg.
- POWER SUPPLY VOLTAGE: ~ 230V single phase (~ 115V upon request).
- LINE FREQUENCY: 50-60 Hz.
- POWER CONSUMPTION: 180VA.
- LINE FUSES: 2 x 1,6A slow.
- NUMBER OF SECTORS: 4.
- PRESSURE REGULATION: from 0 to 160 mmHg.
- AIR COMPRESSOR CAPACITY: 20 lt/min.
- SUPPLIED PRESSURE: max. 3Atm.

• APPLICATORS AND ACCESSORIES:

- Leg strap four sectors
- Pair of legs strap four sectors
- Arm strap four sectors
- Pair of arm strap four sectors
- Four-outlet duplication set
- Two sector abdominal strap
- Splitter set for abdominal strap

- **CE** Certified: this unit fully complies to specifications given by the European Community under 93/42/EEC e 89/336/EEC Directives.

fisioline[®]
biomedical instrumentation

CERT. 9120. FISI
CSQ
UNI EN ISO
9002

CERT. 9124. FISI
CSQ
MED
UNI CEI EN
46002

ISO 9001
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

LINFOPRESS EASY



fisioline[®]
biomedical instrumentation

FISIOLINE s.n.c.

Borgata Molino, 29 - 12060 VERDUNO (CUNEO) - ITALY
Tel. +39 0172 470432 - +39 0172 470433
Fax +39 0172 470891

<http://www.fisioline.com> - e-mail: fisioline@fisioline.com



Le apparecchiature FISIOLINE[®] sono assicurate per la responsabilità civile prodotti dalla SAI.

Dato l'evolversi della tecnologia ed il continuo aggiornamento della produzione, le caratteristiche tecniche e dimensionali delle apparecchiature descritte nel presente catalogo possono subire variazioni.

The technical features and sizes of the appliances described herein are subject to modification, based on technological evolution and on the constant improvement of our production.

LINFOPRESS EASY

Linfopress Easy è l'ultima novità nell'ambito delle pressoterapie sequenziali.

Questo tipo di apparecchiature, utilizzate da decenni in ambito medico e fisioterapico ed ora alla portata di una vasta utenza, consente di intervenire sull'utilizzatore in modo fisiologico, dove sia necessario un aiuto o un costante trattamento per problemi dovuti a cattivo funzionamento del circolo linfatico o venoso.

Linfopress Easy è stata progettata e realizzata per soddisfare sia le esigenze dell'utente in ambito domiciliare che quelle del professionista in ambito fisioterapico ed estetico.

L'ambito domiciliare riveste particolare importanza in quanto un utilizzo prolungato e costante offre una maggiore garanzia di ottenere un risultato duraturo nel tempo. L'accattivante design, le ridotte dimensioni e la semplicità d'uso rendono **Linfopress Easy** particolarmente idonea per trattamenti domiciliari.

L'apparecchio adotta un potente compressore che consente di ottenere un ciclo di gonfiaggio in soli 30 secondi con una precisa regolazione della pressione impostabile dall'utente da 0 a 160 mmHg. Il ciclo di gonfiaggio avviene in modo sequenziale su quattro settori differenti del gambale o del bracciale con sistema di gonfiaggio a settori sovrapposti.

Questo sistema di gonfiaggio è particolarmente indicato in quanto non permette il crearsi di spazi con vuoti di pressione tra un settore e l'altro e il massaggio che si ottiene è più completo, uniforme ed efficace.

I gambali e i bracciali di **Linfopress Easy** sono realizzati in uno speciale materiale plastico, molto resistente e morbido, caratteristiche importanti per non creare arrossamenti cutanei.

L'apparecchio può pilotare un singolo applicatore o una coppia di applicatori tramite gli appositi sdoppiatori; con i gambali, mediante un collegamento aggiuntivo al settore inguinale, è possibile utilizzare una speciale fascia addominale a due settori.

fisioline
biomedical instrumentation



Il funzionamento di **Linfopress Easy** è molto semplice: dopo aver indossato il/i gambale/i o il/i bracciale/i si avvia l'apparecchio azionando l'interruttore di alimentazione. Il ciclo di trattamento consiste nel gonfiaggio in successione dei quattro settori in un tempo di 25 sec. e di 5 sec. di sgonfiaggio; il ciclo viene ripetuto fino allo spegnimento dell'interruttore generale da parte dell'utente. La pressione dei vari settori viene regolata dall'utente mediante la manopola posta sopra il pannello frontale dell'apparecchio.

Linfopress Easy agisce sulle stasi venose e linfatiche, operando un massaggio omogeneo e costante; è utile nel trattamento di linfedemi ed edemi di varia natura; si rivela inoltre indicata per ottenere un defaticamento dopo uno sforzo fisico protratto nella pratica sportiva e nel combattere gli inestetismi della cellulite.



ACCESSORIO OPZIONALE:
Carrello DINAMICO.
OPTIONAL ACCESSORY:
Trolley DINAMICO.

FUNZIONAMENTO SEQUENZIALE

Il trattamento inizia con il gonfiaggio del primo settore (Fase 1) fino al raggiungimento della pressione impostata dall'operatore seguita dal gonfiaggio del secondo settore (Fase 2). Quando la fase 2 giunge a regime il sistema passa alla Fase 3 e così via sino all'ultima fase.




Ad ultimazione della successione avviene lo sgonfiaggio di tutti i settori (Fase 5).

SEQUENTIAL OPERATION

The treatment starts when the first sector inflates (Phase 1) until the pressure previously set by the operator is reached.

Then, the second sector inflates (Phase 2). Once Phase 2 reaches its steady state, the system reaches Phase 3 and so on until the last phase is reached.

Once all the sectors have been inflated, then they start to deflate (Phase 5).

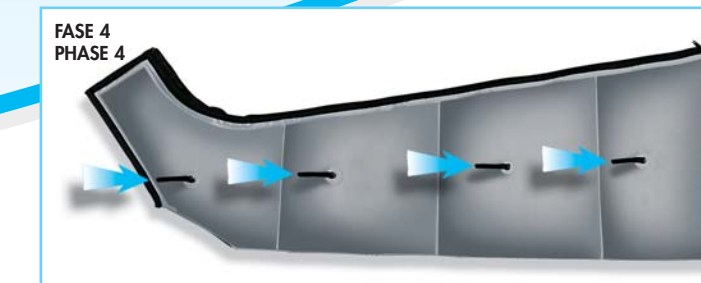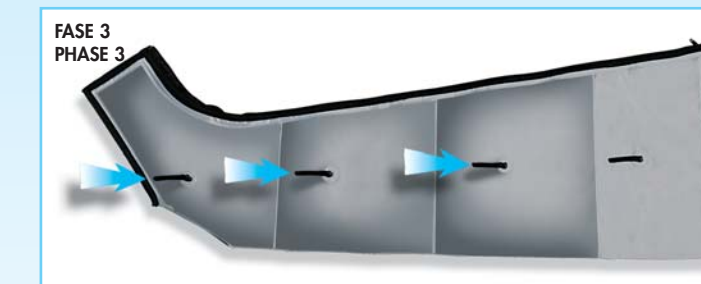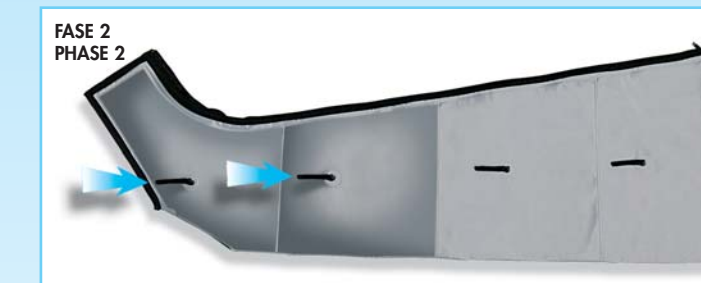

Linfopress Easy is the last novelty in sequential pressotherapy.

This type of appliances that have been used for years for medical and physiotherapy purposes can now be used by a large number of users and allows to act on the user physiologically, wherever help for problems due to an incorrect functioning of the lymphatic or venous system is needed.

Linfopress Easy has been designed and realized to comply with user's requirements for home applications as well as for professionals in physiotherapy and aesthetic applications. Application at home is particularly important in that a long and continual use offers better guarantees of long lasting results. The attractive design, compact size and ease of use makes **Linfopress Easy** suitable for home treatments.

The appliance adopts a powerful compressor which allows to obtain a 30 second inflating cycle with the possibility for the user to adjust the pressure precisely from 0 to 160 mmHg.

The inflating cycle takes place sequentially on four different sectors of the leg and the arm strap with overlapped sector inflating system. This inflating system is particularly interesting in that it does not let any vacuum spaces build between the sectors and the massage obtained is complete, uniform and effective. Legs and arms strap of **Linfopress Easy** are made of a special plastic material, extremely resistant and very soft, in order to avoid rubescence.

The appliance can pilot a single applicator or two applicators by the specific splitters; the leg straps allow to use a special two-sectors abdominal strap by means of an extra connection to the inguinal sector.

Linfopress Easy works in a very easy way. Just put on the leg or arm strap and start the appliance by pressing the power supply switch. The treatment cycle consists in inflating the four sectors one after the other with 25 seconds' time and 5 seconds' deflating. The cycle is repeated until the user switches the appliance off from the main switch. The pressure in the various sectors is adjusted by the user by acting on the knob on the front panel.

Linfopress Easy permits to act on venostasis and limphostasis, with a homogeneous and constant massage; it is useful in treating lymphoedemas and various kind of oedema; furthermore it is suitable for short run after a long physical effort in sport and to fight against the blemishes of cellulitis.