

LINFOPRESS MASTER




Serie "Professional" - Set per arti inferiori.
"Professional" range - Lower limb set.



Serie "Professional" - Bracciale a 8 settori.
"Professional" range - 8 sector arm strap.



Serie "Pratico" - Set per arti inferiori.
"Pratico" range - Lower limb set.

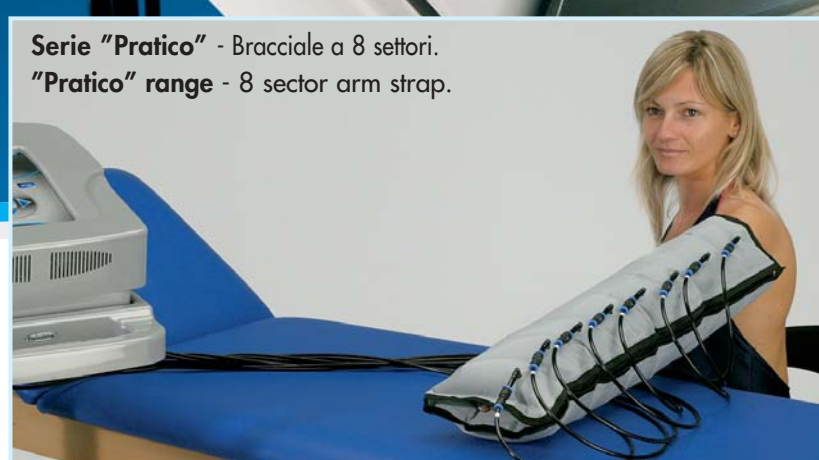

Serie "Pratico" - Bracciale a 8 settori.
"Pratico" range - 8 sector arm strap.

LINFOPRESS MASTER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MODELLO: LINFOPRESS MASTER.
- CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA: apparecchio per pressoterapia.
- CLASSIFICAZIONE TECNICA: apparecchio elettromedicale, classe I Tipo BF.
- CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO: IIa (Dir.93/42/CEE).
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 60601-1 (IEC 601-1), CEI 62.5, EN 60601-1-2 (IEC 601-1-2), EN 60601-1-4 (IEC 601-1-4).
- DIMENSIONI GENERATORE: 370 x 440 x 130 mm.
- PESO: 7,4 Kg.
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: ~ 230V monofase (~ 115V a richiesta).
- FREQUENZA DI RETE: 50-60 Hz.
- POTENZA ASSORBITA: 140VA.
- NUMERO SETTORI: 8.
- VISUALIZZAZIONE: LCD grafico retroilluminato.
- INDICATORE della pressione erogata.
- REGOLAZIONE PRESSIONE: da 0 a 200 mmHg.
- TEMPORIZZATORE: variabile da 1 a 180 min.
- SEGNALE ACUSTICA di fine trattamento.
- PORTATA D'ARIA DEL COMPRESSORE: 30 lt/min.
- PRESSIONE EROGATA DAL COMPRESSORE: max.3,5 Atm.
- PROGRAMMI TERAPEUTICI PREIMPOSTATI: 80
- PROGRAMMI UTENTE: 20

DOTAZIONE STANDARD A SCELTA:

Serie "PROFESSIONAL" - Colore Blu
SET PER ARTI INFERIORI:

- 2 gambali a 6 settori con piede regolabile
- Fascia addominale a due settori
- Set di duplicazione a 6 uscite.

Serie "PRATICO" - Colore Grigio
SET PER ARTI INFERIORI:

- 2 gambali a 6 settori con piede
- Fascia addominale a due settori
- Set di duplicazione a 6 uscite.

APPLICATORI E ACCESSORI OPZIONALI:

- Serie "PROFESSIONAL" - Colore Blu
 - Bracciale a 8 settori (DX / SX)
 - Coppia di bracciali a 8 settori
 - Set di duplicazione a 8 uscite
 - Copriletino con tasche laterali porta applicatori.
- Serie "PRATICO" - Colore Grigio
 - Bracciale a 8 settori
 - Coppia di bracciali a 8 settori
 - Set di duplicazione a 8 uscite
 - Carrello TRIO

- MARCATURA CE : apparecchiatura conforme alle disposizioni contenute nelle Direttive 93/42/CEE e 89/336/CEE e successive modifiche.

TECHNICAL FEATURES:

- MODEL: LINFOPRESS MASTER.
- COMMERCIAL CLASSIFICATION: pressure therapy instrument.
- TECHNICAL CLASSIFICATION: electromedical instrument class I type BF.
- CLASS OF THE MEDICAL INSTRUMENT: IIa (Dir.93/42/EEC).
- REFERENCE STANDARDS: EN 60601-1 (IEC 601-1), CEI 62.5, EN 60601-1-2 (IEC 601-1-2), EN 60601-1-4 (IEC 601-1-4).
- SIZE OF THE GENERATOR: 370 x 440 x 130 mm.
- WEIGHT: 7.4 Kg.
- POWER SUPPLY VOLTAGE: ~ 230V single phase (~ 115V upon request).
- LINE FREQUENCY: 50-60 Hz.
- ABSORBED POWER: 140VA
- NUMBER OF SECTORS: 8
- DISPLAY: graphic backlit LCD.
- PRESSURE OUTPUT INDICATOR.
- PRESSURE REGULATION: 0 to 200 mmHg.
- TIMING: ranging 1 to 180 min.
- ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment.
- AIR COMPRESSOR CAPACITY: 30 l/min.
- SUPPLIED PRESSURE: max.3.5 Atm.
- PRESET THERAPEUTIC PROGRAMS: 80
- USER'S PROGRAMS: 20

STANDARD EQUIPMENT to choose from:

- "PROFESSIONAL" range - Blue
LOWER LIMB SET:
 - 6-sector leg strap pair with adjustable foot enclosure
 - Two-sector abdominal strap
 - 6-outlet duplication set.

- "PRATICO" range - Gray
LOWER LIMB SET:
 - 6-sector leg strap pair with foot enclosure
 - Two sector abdominal strap
 - 6-outlet duplication set.

- OPTIONAL APPLICATORS AND ACCESSORIES
"PROFESSIONAL" range - Blue
 - 8-sector arm strap (right/left)
 - 8-sector arm strap pair
 - 8-outlet duplication set
 - Bed cover with side pockets to store the applicators.
- "PRATICO" range - Gray
 - 8-sector arm strap
 - 8-sector arm strap pair
 - 8-outlet duplication set
 - TRIO trolley

- CE MARK: instrument in conformity with the contents of the directives 93/42/EEC and 89/336/EEC as further modified.

LINFOPRESS MASTER



fisioline[®]
biomedical instrumentation

CERT. 9120. FISI
CSQ
UNI EN ISO
9001:2000

CERT. 9124. FISI
CSQ
MED
CEI UNI EN ISO
13485:2002

ISO 9001
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

FISIOLINE s.n.c.

Borgata Molino, 29 - 12060 VERDUNO (CUNEO) - ITALY

Tel. +39 0172 470432 - +39 0172 470433

Fax +39 0172 470891

<http://www.fisioline.com> - e-mail: fisioline@fisioline.com



Le apparecchiature FISIOLINE sono assicurate per la responsabilità civile prodotti dalla SAI.

Dato l'evolversi della tecnologia ed il continuo aggiornamento della produzione, le caratteristiche tecniche e dimensionali delle apparecchiature descritte nel presente catalogo possono subire variazioni.

FISIOLINE instruments are covered by SAI product liability insurance.

The technical features and sizes of the instruments described herein are subject to modification, based on technological evolution and on the constant improvement of our products.

LINFOPRESS MASTER

Linfopress Master è l'ultima novità nell'ambito delle pressoterapie peristaltiche a settori differenziati.

Questo tipo di apparecchiature, utilizzate da decenni in ambito medico, fisioterapico ed estetico, consente di intervenire sull'utilizzatore in modo fisiologico dove sia necessario un aiuto o un costante trattamento per problemi dovuti a cattivo funzionamento del circolo linfatico o venoso.

Linfopress Master è stata progettata e realizzata per soddisfare le esigenze del professionista in ambito medico, fisioterapico ed estetico. L'accattivante design, la semplicità d'uso e la sua versatilità rendono Linfopress Master particolarmente idonea per trattamenti in ambito ospedaliero o ambulatoriale.

Linfopress Master è gestita da un innovativo microprocessore e adotta un potente compressore che consente di ottenere cicli di gonfiaggio con una precisa regolazione della pressione (da 0 > 200 mmHg) per ogni singolo settore, costantemente visualizzata dall'ampio display grafico retroilluminato.

Con **Linfopress Master** l'operatore ha una vasta scelta di scansioni operative, dispone di 80 programmi di lavoro preimpostati suddivisi nelle due categorie "Arti Inferiori" ed "Arti Superiori" e può memorizzare i programmi personalizzati nelle 20 memorie libere a disposizione.

Linfopress Master è dotata di otto settori indipendenti, contraddistinti da regolazione separata delle grandezze operative (sequenza e pressione per ogni singolo settore). La sequenza di gonfiaggio può essere interamente programmata dall'utente e memorizzata nell'elenco "Programmi Utente".

I gambali e i bracciali di **Linfopress Master** adottano una particolare tecnologia costruttiva a settori sovrapposti che permette di ottenere trattamenti privi di stasi e flussi retrogradi.

Tutti gli applicatori sono realizzati in uno speciale materiale plastificato, resistente e morbido al tatto, al fine di non creare arrossamenti cutanei.



Nel set "Professional", le vesciche che si trovano all'interno degli applicatori sono facilmente estraibili e la doppia cerniera consente di regolare gli applicatori in funzione della dimensione degli arti.

Linfopress Master trova largo impiego nelle varie branche della medicina: in flebologia, in medicina sportiva, in dermatologia, in geriatria, nelle terapie post-chirurgiche, nella linfologia e nella neuro-endocrinologia. Svolge tuttora un ruolo predominante nel trattamento dei linfedemi conseguenti a turbe veno-linfatiche operando un massaggio omogeneo e costante.

Linfopress Master si rivela inoltre indicata per ottenere un defaticamento dopo uno sforzo fisico protratto nella pratica sportiva e nel combattere gli inestetismi della cellulite.



The "Professional" model includes applicators for inflating sections inside that are easily removed and with a double zip to adjust the applicators according to actual limb sizes.

Linfopress Master is widely used in the various fields of medicine such as: phlebology, sports medicine, dermatology, geriatrics, post-surgical therapies, lymphology and neuro-endocrinology. It still has a predominant role in treating lymphedemas due to venous-lymphatic insufficiencies by applying a homogeneous constant massaging action.

Linfopress Master is also suitable for soft tissue recovery after long physical efforts in sports and for reducing the visual effects of cellulite.

ACCESSORIO OPZIONALE:
Carrello TRIO.
OPTIONAL ACCESSORY:
Trolley TRIO.

fisioline
biomedical instrumentation



Coprilettino con tasche laterali porta applicatori - colore blu.
Bed cover with side pockets to store the applicators - blue.

Serie "Professional" - Bracciale con doppia regolazione a cerniera.
"Professional" range - Arm strap with double zip adjustment.



Serie "Professional" - Fascia addominale e gambale con piede regolabile.
"Professional" range - Abdominal and leg straps with adjustable foot.



Linfopress Master is the latest development in peristaltic differentiated-sector pressure therapy.

This type of instruments have been used in the medical, physiotherapeutic and cosmetic fields during the last decades. The instrument is an essential aid for patients who suffer from venous and/or lymphatic malfunctions.

Linfopress Master has been designed and manufactured to meet professional requirements for medical, physiotherapeutic and cosmetic applications. A pleasant design, combined with an uncomplicated use and versatility, make Linfopress Master particularly suitable for hospital or ambulatory treatments.

Linfopress Master is controlled by an innovative microprocessor and exploits a powerful compressor in order to obtain inflating cycles with an accurate pressure regulation (0 to > 200 mmHg) in every single sector. The pressures are constantly checked for safety and their values displayed on a wide backlit graphic panel.

Linfopress Master offers the operator a wide range of scanning operations, with 80 preset operating programs divided into two categories: "Lower limbs" and "Upper limbs". Additionally, it can store personalized programs in 20 memories available to the purpose.

Linfopress Master has eight independently controlled sectors, with separate adjustment of the operating parameters (sequence and pressure in each sector). The inflating sequence can be programmed entirely by the user and stored in the "User's Program" List.

Linfopress Master leg and arm straps utilize special construction technologies with overlapping sectors allowing treatments with no stagnation or retrograde flows. All the applicators are made of a special plasticized material, while highly resistant it is soft to touch and hypoallergenic.